


MASSAGGIO

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Fotela masującego Massaggio Piccolo



Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego poznać jego wszystkie funkcje i możliwości. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

Sprzedawca zastrzega sobie prawa do zmiany i interpretacji projektu fotela masującego. Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.

SPIS TREŚCI

BEZPIECZEŃSTWO I UŻYTKOWANIE	2
SCHEMAT FOTEŁA	3
FUNKCJE I DZIAŁANIE	4
SPECYFIKACJA PRODUKTU	7

BEZPIECZEŃSTWO I UŻYTKOWANIE

1. Bezpieczeństwo

- Używaj fotela masującego zgodnie z instrukcją obsługi.
- Używanie fotela masującego w sposób nieokreślony w instrukcji jest zabronione.
- Sprawdź czy napięcie sieci elektrycznej w gniazdku odpowiada specyfikacji technicznej fotela masującego.
- Podłącz fotela masującego do gniazda z tzw. uziemieniem.
- Rekomendowane jest używanie fotela masującego w 15 minutowych cyklach.
- Nie używaj fotela masującego, gdy materiał pokrywający go jest uszkodzony.
- Nie używaj fotela masującego, gdy jego przewody są uszkodzone.
- Nie używaj fotela masującego, gdy jesteś pod wpływem alkoholu oraz kiedy źle się czujesz.
- Nie zaleca się korzystania z fotela masującego wcześniej niż na godzinę po spożyciu posiłku.
- Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części fotela masującego.
- Nie ustawiaj dużej siły masażu w pierwszych etapach korzystania z fotela masującego.
- Nie używaj fotela masującego, gdy działa nieprawidłowo, koniecznie skonsultuj się ze sprzedawcą.
- Przerwij korzystanie z fotela masującego, kiedy poczujesz się źle, skonsultuj się z lekarzem.

2. Środowisko

- Nie używaj fotela masującego na zewnątrz budynków.
- Nie używaj fotela masującego w pomieszczeniach o dużej temperaturze i wilgoci powietrza.
- Nie ustawiaj fotela masującego w pobliżu ognia i chroń go przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach gdzie nie ma wystarczającej przestrzeni, bądź cyrkulacji powietrza.
- Nie używaj fotela masującego od razu po gwałtownych zmianach temperatury.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach silnie zakurzonych.

3. Przeciwwskazania

- Cięża.
- Do pół roku po operacji.
- Brak zgody lekarza.

4. Konserwacja i serwisowanie


- Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem, w celu uniknięcia zranienia, bądź też uszkodzenia fotela masującego.
- Czyść fotel masujący za pomocą suchej szmatki lub specjalnych środków do tego przeznaczonych, nie używaj rozcieńczalnika, benzyny ani alkoholu.
- Jeżeli fotel masujący miałby być przez długi czas nieużywany, zwiń kabel, osłoń go i umieść w suchym pomieszczeniu.
- Nie przesuwaj fotela masującego po nierównej powierzchni.
- Pamiętaj o wyłączeniu fotela masującego po zakończeniu korzystania.
- Fotel masujący powinien być serwisowany wyłącznie przez serwis sprzedawcy.


5. Rozwiązania zwykłych usterek

- Naturalnym jest odgłos pracujących silowników w momencie używania fotela masującego.
- Jeżeli panel sterujący nie działa poprawnie, sprawdź czy fotel masujący jest podłączony poprawnie oraz czy włącznik jest w pozycji „ON”.
- Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać, co najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z fotela masującego.

Fotel masujący nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub przy braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z fotela masującego przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

SCHEMAT FOTELE

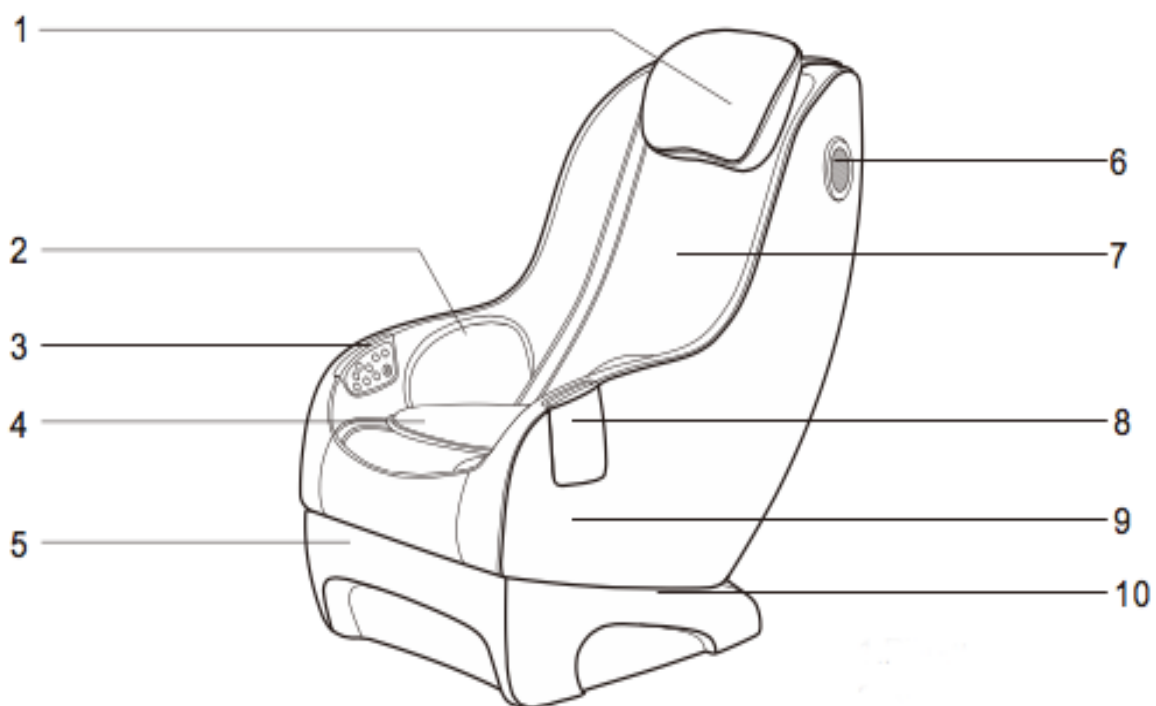


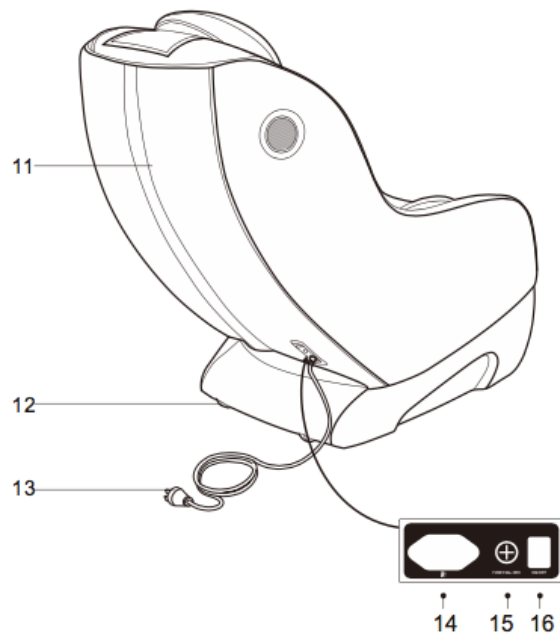


- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Poduszka pod głowę | 9. Podłokietnik |
| 2. Poduszka masująca uda | 10. Osłona boczna |
| 3. Pilot | 11. Osłona mechanizmów |
| 4. Poduszka na siedzisko | 12. Rółka |
| 5. Osłona przednia | 13. Przewód zasilający |
| 6. Głośnik | 14. Wejście na kabel zasilający |
| 7. Oparcie | 15. Bezpiecznik |
| 8. Schowek na telefon | 16. Włącznik zasilania |

FUNKCJE I DZIAŁANIE

- Wyposażony w mechaniczne ramiona z zestawem 4 kul masujących.
- 3 technik masażu: ugniatanie, oklepywanie, masaż synchroniczny (oklepywanie z ugniataniem).
- 3 programów automatycznych: masaż całego ciała, masaż szyi i ramion oraz masaż pleców i tali.
- Możliwość wyboru kierunku ugniatania (w górę, w dół) oraz dwóch szybkości oklepywania.
- Możliwość 3 stopniowej regulacji intensywności działania poduszek powietrznych na udach.
- Przy pomocy Bluetooth można podłączyć swoje urządzenie i odtwarzać muzykę.
- Muzyka jest odtwarzana z dwóch głośników umiejscowionych przy ramionach.
- Ramiona masujące poruszają w technologii LS-shape, co umożliwi dokładny masaż od szyi po uda.
- Po wyłączeniu fotela, ramiona masujące wrócą do pozycji wyjściowej.
- Opcjonalna możliwość korzystania z dodatkowej poduszki na siedzisko.

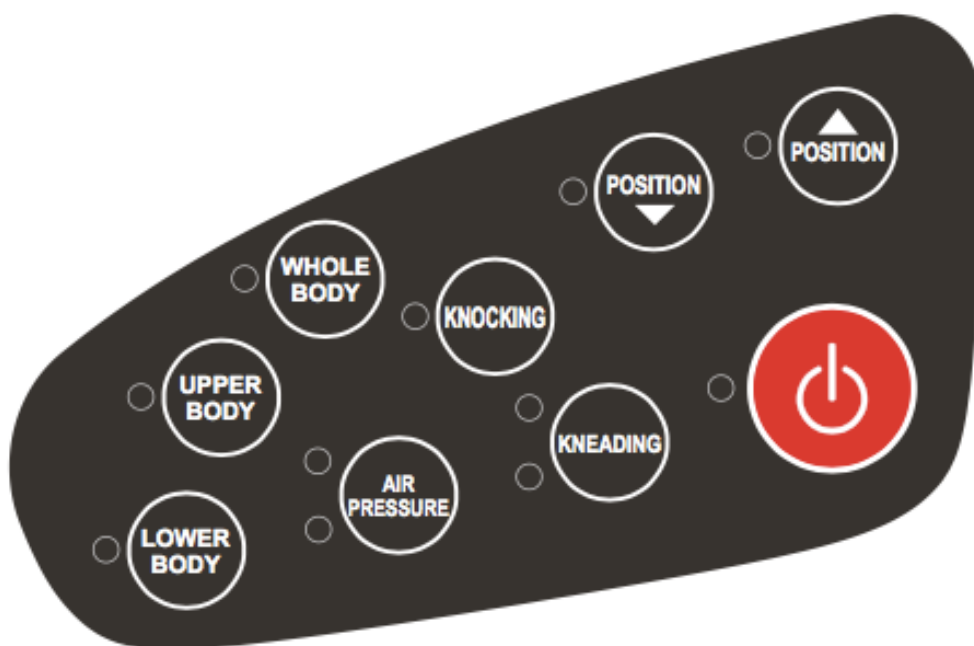

1. PODŁĄCZ ZASILANIE

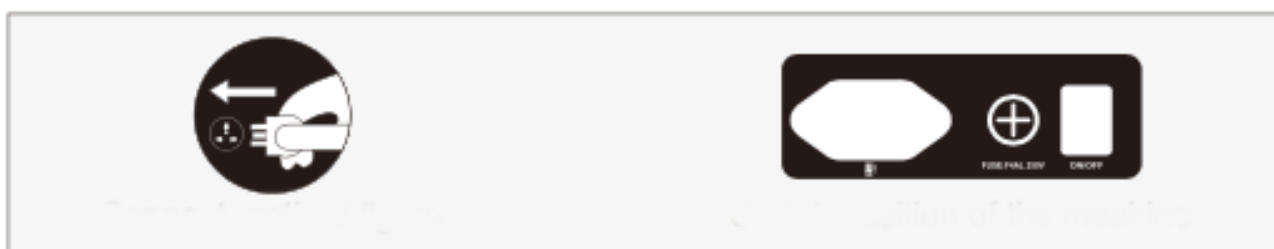

Podłącz wtyczkę do kontaktu

Przełącz włącznik zasilania

2. START MASAŻU

Przyciśnij czerwony przycisk żeby rozpocząć masaż. Wybierz jeden z dostępnych programów automatycznych lub jedna z dostępnych technik masażu.

Programy automatyczne

Przycisk	Funkcja	Oznaczenie na pilocie
WHOLE BODY	Program automatyczny masujący całe plecy, pośladki oraz uda.	Świecąca dioda przy odpowiednim programie
UPPER BODY	Program automatyczny masujący górne części pleców.	
LOWER BODY	Program automatyczny masujący dolne części pleców, pośladki oraz uda.	

Techniki manualne

Opis	Przycisk	Funkcje
Techniki masażu	KNEADING	Ugniatanie z możliwością ustawienia jednego z dwóch kierunków.
Techniki masażu	KNOCKING	Oklepywanie z możliwością regulacji siły.
Pozycja ramion masujących		Ramiona masujące przesuwają się w górę.
Pozycja ramion masujących		Ramiona masujące przesuwają się w dół.
Poduszki masujące	AIR PRESSUERE	Masaż ud za pomocą poduszek powietrznych. Możliwość regulacji intensywności w 3 poziomach.

3. WŁĄCZANIE MUZYKI PRZY PRZY POMOCY MODUŁU BLUETOOTH

- Uruchom moduł Bluetooth w swoim urządzeniu, wyszukaj fotel masujący (nazwa zaczynająca się na IMCM-....) i nawiąż połączenie. Następnie w swoim urządzeniu otwórz aplikację odpowiedzialna za odtwarzanie muzyki i włącz wybrany utwór.
- Czasami podczas tego procesu może być wymagane hasło ('0000' lub '1234').

4. WYŁĄCZENIE ZASILANIA, ZATRZYMYWANIE MASAŻU

- Podczas trwania masażu wciśnij czerwony przycisk lub poczekaj aż czas trwania masażu się skończy. Wszystkie funkcje zostaną zatrzymane, a ramiona masujące wrócą do pozycji wyjściowej.
- Gdy ramiona masujące wrócą do pozycji wyjściowej można wyłączyć zasilanie.



Wyłącz przycisk odpowiadający za zasilanie

Wyciągnij wtyczkę do zasilania


5. PODŁOŻE

Używanie fotela masującego na drewnianej podłodze może ją zniszczyć. Zaleca się stosowanie dywaników, bądź innych podstaw, żeby zapobiec uszkodzeniom podłogi.




6. PRZENOSZENIE FOTELA

Przenoszenie możliwe jest za pomocą tylnych kółek (używaj tak jak na rysunku poniżej).

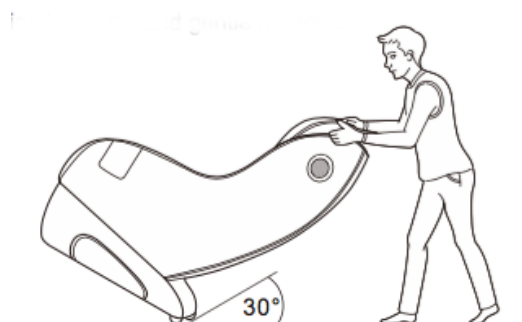

7. KORZYSTANIE Z PODUSZKI NA SIEDZISKO

Opcjonalnie można korzystać z załączonej do zestawu poduszki na siedzisko.

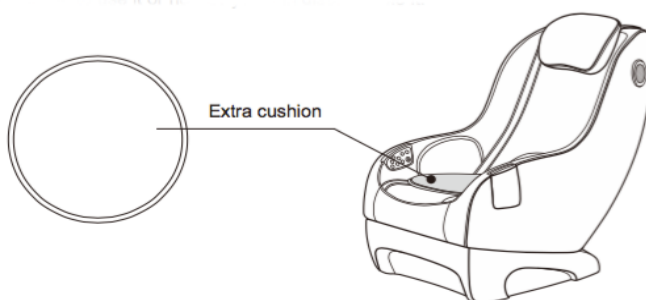

SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Model: Massaggio Piccolo.
- Napięcie: 220 / 240 V ~ 50 / 60 Hz.
- Pobór mocy: 45 W.
- Rekomendowany czas użytkowania: 20 min.