

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fotela masującego Massaggio Bello



Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego poznać jego wszystkie funkcje i możliwości. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

Sprzedawca zastrzega sobie prawa do zmiany i interpretacji projektu fotela masującego. Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.

Spis treści

Bezpieczeństwo i użytkowanie	2
Schemat fotela	3
Funkcje i działanie	3
Użytkowanie	4
Specyfikacje produktu	8

Bezpieczeństwo i użytkowanie

1. Bezpieczeństwo

- Używaj fotela masującego zgodnie z instrukcją obsługi.
- Używanie fotela masującego w sposób nieokreślony w instrukcji jest zabronione.
- Sprawdź czy napięcie sieci elektrycznej w gniazdku odpowiada specyfikacji technicznej fotela masującego.
- Podłącz fotela masującego do gniazda z tzw. uziemieniem.
- Rekomendowane jest używanie fotela masującego w 15 minutowych cyklach.
- Nie używaj fotela masującego, gdy materiał pokrywający go jest uszkodzony.
- Nie używaj fotela masującego, gdy jego przewody są uszkodzone.
- Nie używaj fotela masującego, gdy jesteś pod wpływem alkoholu oraz kiedy źle się czujesz.
- Nie zaleca się korzystania z fotela masującego wcześniej niż na godzinę po spożyciu posiłku.
- Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części fotela masującego.
- Nie ustawiaj dużej siły masażu w pierwszych etapach korzystania z fotela masującego.
- Nie używaj fotela masującego, gdy działa nieprawidłowo, koniecznie skonsultuj się ze sprzedawcą,
- Przerwij korzystanie z fotela masującego, kiedy poczujesz się źle, skonsultuj się z lekarzem.

2. Środowisko

- Nie używaj fotela masującego na zewnątrz budynków.
- Nie używaj fotela masującego w pomieszczeniach o dużej temperaturze i wilgoci powietrza.
- Nie ustawiaj fotela masującego w pobliżu ognia i chroń go przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach gdzie nie ma wystarczającej przestrzeni, bądź cyrkulacji powietrza.
- Nie używaj fotela masującego od razu po gwałtownych zmianach temperatury.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach silnie zakurzonych.

3. Przeciwwskazania

- Cięża.
- Do pół roku po operacji.
- Brak zgody lekarza.

4. Konserwacja i serwisowanie


- Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem, w celu uniknięcia zranienia, bądź też uszkodzenia fotela masującego.
- Czyść fotel masujący za pomocą suchej szmatki lub specjalnych środków do tego przeznaczonych, nie używaj rozcieńczalnika, benzyny ani alkoholu.
- Jeżeli fotel masujący miałby być przez długi czas nieużywany, zwiń kabel, osłoń go i umieść w suchym pomieszczeniu.
- Nie przesuwaj fotela masującego po nierównej powierzchni.
- Pamiętaj o wyłączeniu fotela masującego po zakończeniu korzystania.
- Fotel masujący powinien być serwisowany wyłącznie przez serwis sprzedawcy.

5. Rozwiązania zwykłych usterek

- Naturalnym jest odgłos pracujących silowników w momencie używania fotela masującego.
- Jeżeli panel sterujący nie działa poprawnie, sprawdź czy fotel masujący jest podłączony poprawnie oraz czy włącznik jest w pozycji „ON”.
- Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać, co najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z fotela masującego.

Fotel masujący nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub przy braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z fotela masującego przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Schemat fotela

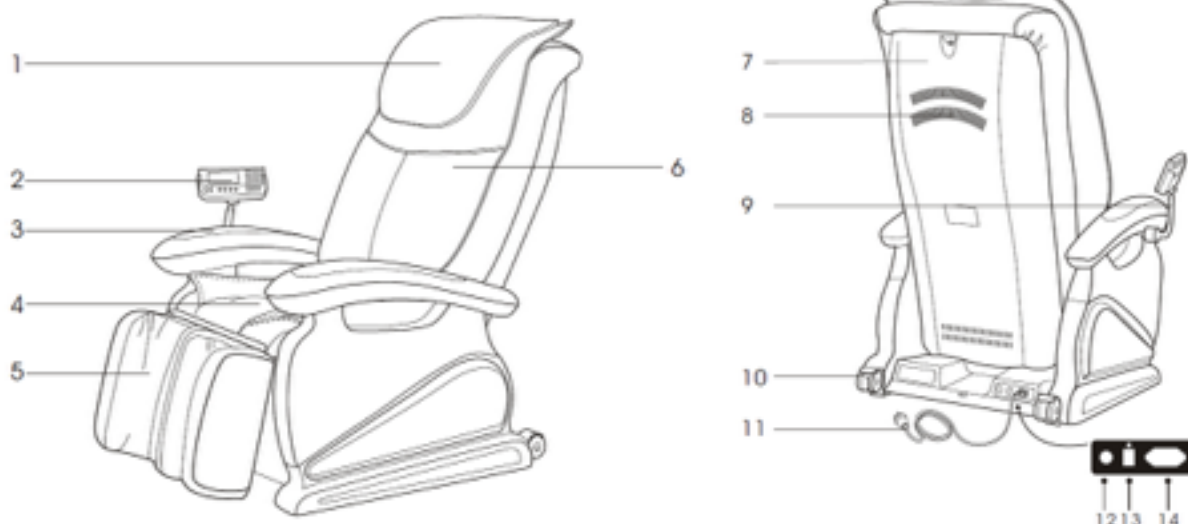


- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Poduszka | 10. Tylne Kółka |
| 2. Panel sterujący | 11. Przewód zasilania |
| 3. Podłokietnik | 12. Bezpiecznik |
| 4. Siedzisko | 13. Włącznik |
| 5. Podnóżek | 14. Gniazdo zasilania |
| 6. Oparcie | |
| 7. Tylna obudowa | |
| 8. Otwór wentylacyjny | |
| 9. Uchwyt na pilot | |

Funkcje i działanie

- Wyposażony w mechaniczne ramiona z zestawem 4 kul masujących.
- Funkcja automatycznego skanowania linii kręgosłupa przed rozpoczęciem masażu.
- 5 technik masażu: shiatsu, ugniatanie, rozbijanie, oklepywanie, masaż synchroniczny (oklepywanie z ugniataniem).
- 8 trybów automatycznych: masaż eliminujący ból mięśni, masaż eliminujący zmęczenie, masaż komfortowy, relaksacyjny, masaż całego ciała, szyi i ramion, talii.
- Możliwość wyboru zakresu masażu górnych części ciała: masaż punktowy, częściowy oraz masaż całego ciała. W masażu punktowym i częściowym możliwość dokładnego wybrania miejsca prowadzenia masażu.
- Możliwość regulacji szybkości prowadzenia masażu - 5 poziomów.
- Możliwość regulacji szerokości prowadzenia masażu, w trakcie masażu rozbijanie, shiatsu oraz oklepywanie - 3 poziomy.
- 3 tryby masażu poduszkami powietrznymi: dolne partie, uda, łydki.
- Funkcja rozciągania łydek.
- Możliwość regulacji intensywności masażu poduszkami powietrznymi - 2 poziomy.
- Podgrzewany promieniami podczerwonymi w oparciu do 40 stopni Celsjusza
- Ogrzewane oparcie – ogrzewanie promieniami podczerwonymi.
- Automatyczne ustawianie pozycji oparcia oraz podnóżka.
- Po wyłączeniu fotela, wraca on do pozycji siedzącej.

Użytkowanie

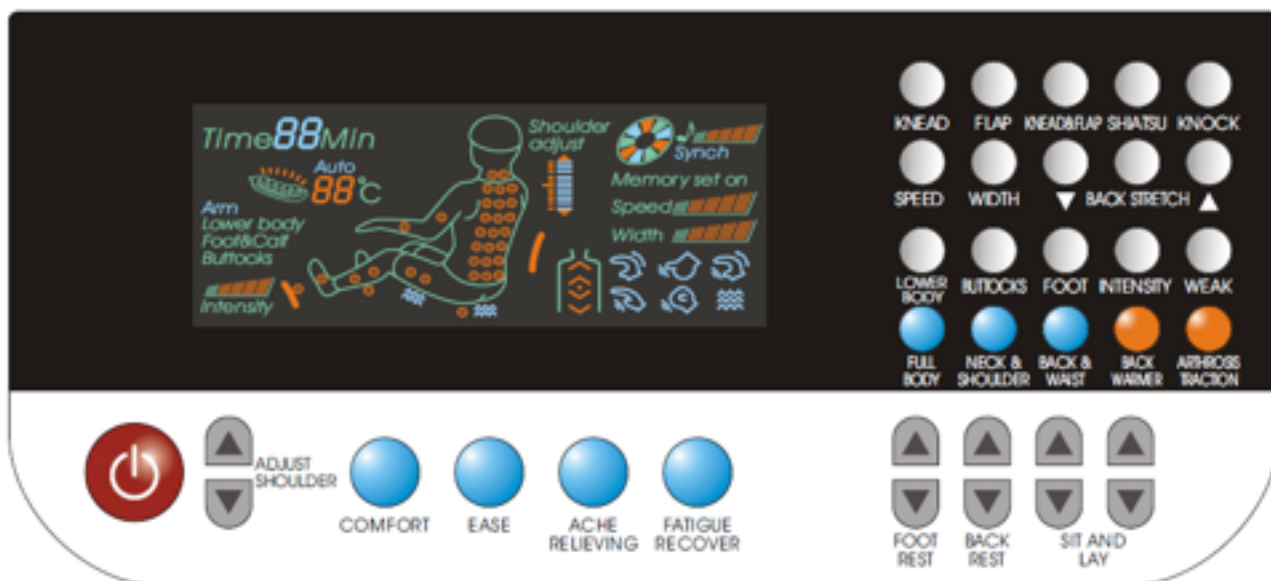



1. Dopasowanie położenia oparcia i podnóżków (nie używać w momencie wykonywania masażu)

Podnoszenie oparcia (back rest)		Przytrzymaj przycisk, a oparcie będzie się powoli podnosiło, gdy puścisz zatrzyma się w danej pozycji
Opuszczanie oparcia (back rest)		Przytrzymaj przycisk, a oparcie będzie powoli opadało, gdy puścisz zatrzyma się w danej pozycji
Podnoszenie podnóżków (foot rest)		Przytrzymaj przycisk, a podnóżki będą się powoli podnosiły, gdy puścisz zatrzymają się w danej pozycji
Opuszczanie podnóżków (foot rest)		Przytrzymaj przycisk, a podnóżki będą powoli opadały, gdy puścisz zatrzymają się w danej pozycji
Przejdźcie do pozycji leżącej (sit and lay)		Przytrzymaj przycisk, a fotel będzie przechodził do pozycji leżącej
Powrót do pozycji siedzącej (sit and lay)		Przytrzymaj przycisk, a fotel będzie przechodził do pozycji siedzącej


2. Rozpoczęcie masażu

	Przyciśnięcie przycisku spowoduje uruchomienie fotela masującego. Ponowne jego przyciśnięcie spowoduje zaprzestanie prowadzenia masażu i przejście w stan czuwania
--	--

- Wciśnij czerwony przycisk, aby rozpocząć masaż
- Na początek fotel zeskanuje linię kręgosłupa, wykryje pozycję ramion oraz punktów masażu. Po zakończeniu detekcji usłyszysz sygnał dźwiękowy „di di”. Następnie możesz dopasować pozycję ramion
- Jeżeli ramiona masujące nie są na wysokości ramion, możesz je ustawić manualnie w 5 stopniach zakresu.

	Przesuń mechanizm do góry, aby osiągnąć poziom ramion
	Przesuń mechanizm w dół, aby osiągnąć poziom ramion

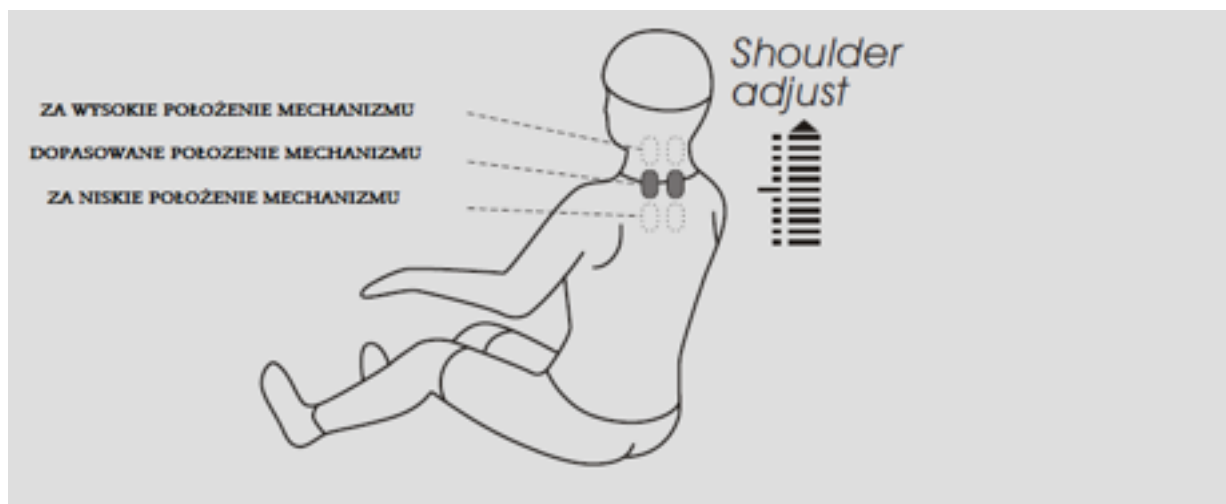


Dopasowanie mechanizmu do poziomu ramion









3. Automatyczne programy masujące (niebieskie przyciski)

Nazwa masażu	Opis	Wyświetlacz
Comfort	Spokojny masaż, rozluźniający mięśnie	AUTO 01
Ease	Relaksujący, poprawiający cyrkulację krwi	AUTO 02
Ache relieving	Głęboki masaż relaksujący obolałe mięśnie	AUTO 03
Fatigue recover	Zmniejszający zmęczenie, pobudzający energetyczny masaż	AUTO 04
Full Body	Masaż prowadzony w zakresie całego ciała	AUTO F1
Neck and shoulder	Masaż prowadzony w zakresie szyi i ramion	AUTO F2
Back and waist	Masaż prowadzony w zakresie talii	AUTO F3

4. Techniki masażu - masaże manualne

Nazwa	Przycisk	Wyświetlacz	Możliwość dopasowania masażu pod względem
Dogłębne uciskanie - Shiatsu	SHIATSU		Siły (strength), prędkości (speed), rozpiętości (width)
Ugniatania	RNEAD		Siły (strength), prędkości (speed)
Oklapywanie	FLAP		Siły (strength), prędkości (speed), rozpiętości (width)
Ugniatanie z oklepywaniem	RNEAD & FLAP		Prędkości (speed), rozpiętości (width)
Uderzanie	KNOCK		Siły (strength), prędkości (speed), rozpiętości (width)

5. Regulacja masażu manualnych

Prędkość	SPEED		5 poziomów szybkości
Rozpiętość	WIDTH		3 poziomy rozpiętości
 Używanie strzałek daje możliwość idealnego dopasowania miejsca prowadzenia masażu	Stała pozycja masażu (fixed), punktowy		
	Mały obszar masażu (partial), częściowy		
	Całociowy masaż pleców (overall)		

6. Ogrzewania oparcia


Funkcja	Przycisk	Opis
Ogrzewania oparcia	BACK WARMER	Ogrzewanie oparcia do do 40 stopni Celsjusza

7. Masaż poduszkami powietrznymi

Funkcja	Przycisk	Opis
Masaż dolnych partii ciała	LOWER BODY	Uruchamia masaż pneumatyczny dolnych partii ciała, 2 poziomy intensywności
Masaż pośladków	BUTTOCKS	Uruchamia masaż pneumatyczny pośladków, 2 poziomy intensywności
Masaż nóg	FOOT	Uruchamia masaż pneumatyczny nóg, łydek, 2 poziomy intensywności
2 poziom intensywności	INTENSITY	Zwiększenie intensywności masażu poduszkami powietrznymi
	WEAR	Zmniejszenie intensywności masażu poduszkami powietrznymi

7. Używanie poduszki

Zaleca się stosowanie poduszki przy masażach, gdyż łagodzi ona uciski na kark i ramiona. W celu zwiększenia odczuwalności masażu możliwe jest usunięcie poduszki.

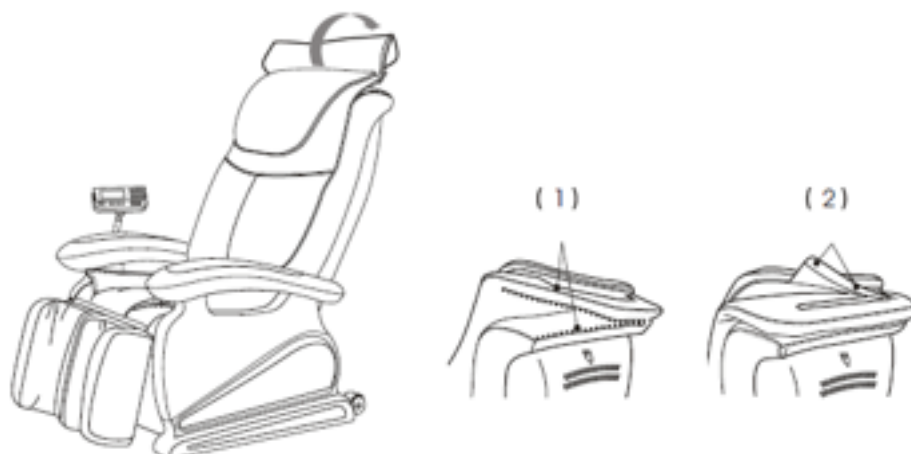

8. Przenoszenie fotela.

Przenoszenie możliwe jest za pomocą tylnych kółek (używaj tak jak na rysunku poniżej)



Specyfikacja produktu

- Model: Massaggio Bello
- Napięcie: 220 / 240 V ~ 50 / 60 Hz
- Pobór mocy: 200 W
- Pobór mocy w stanie gotowości: 0,33 W
- Rekomendowany czas użytkowania: 15 min.