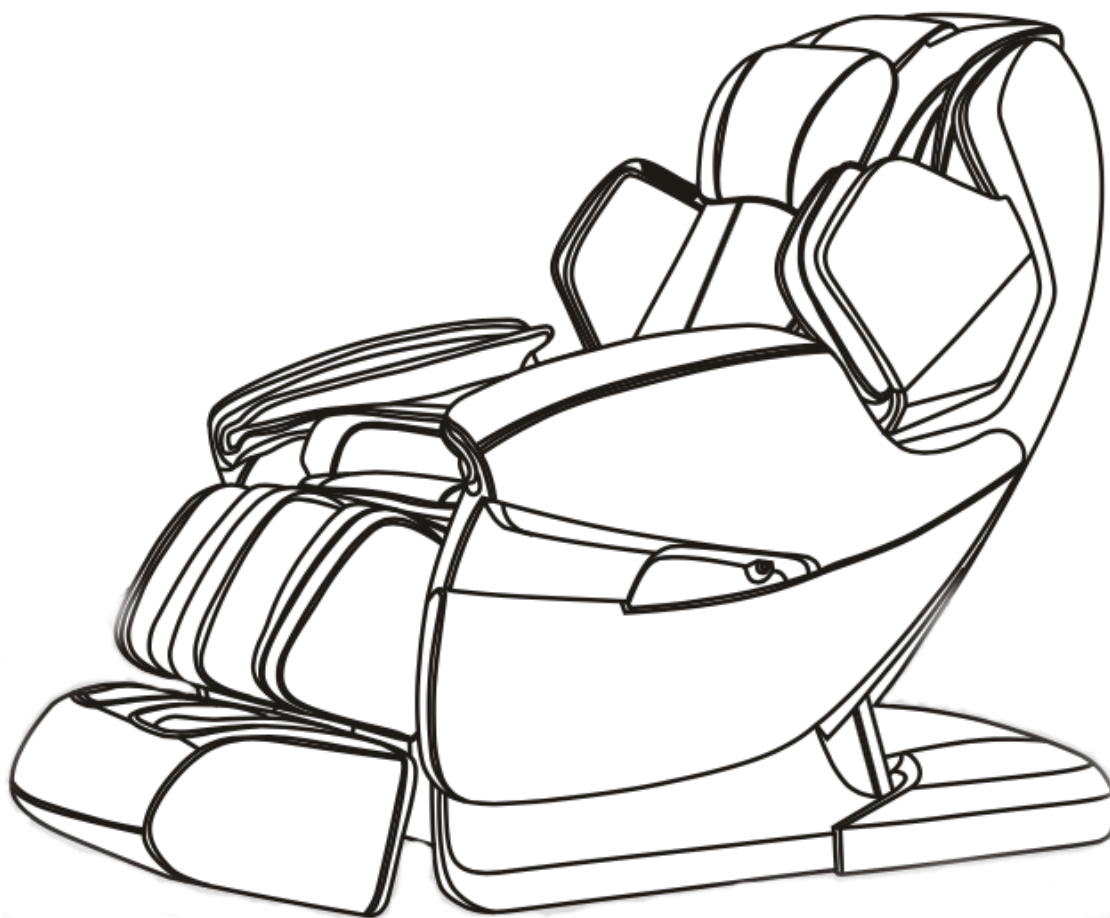


  
**MASSAGGIO**  
**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**Fotela masującego Massaggio Stravagante**



Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego poznać jego wszystkie funkcje i możliwości. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

Sprzedawca zastrzega sobie prawa do zmiany i interpretacji projektu fotela masującego. Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.

## **SPIS TREŚCI**

<b>BEZPIECZEŃSTWO I UŻYTKOWANIE .....</b>	<b>2</b>
<b>SCHEMAT FOTEŁA .....</b>	<b>3</b>
<b>FUNKCJE I DZIAŁANIE .....</b>	<b>5</b>
<b>OBSŁUGA FOTEŁA ZA POMOCĄ APLIKACJI.....</b>	<b>12</b>
<b>ZAKOŃCZENIE MASAŻU .....</b>	<b>21</b>
<b>MONTAŻ I USTAWIENIE FOTEŁA.....</b>	<b>22</b>
<b>SPECYFIKACJA PRODUKTU.....</b>	<b>24</b>

# BEZPIECZEŃSTWO I UŻYTKOWANIE

## 1. Bezpieczeństwo

- Używaj fotela masującego zgodnie z instrukcją obsługi.
- Używanie fotela masującego w sposób nieokreślony w instrukcji jest zabronione.
- Sprawdź czy napięcie sieci elektrycznej w gniazdku odpowiada specyfikacji technicznej fotela masującego.
- Podłącz fotela masującego do gniazda z tzw. uziemieniem.
- Rekomendowane jest używanie fotela masującego w 15 minutowych cyklach.
- Nie używaj fotela masującego, gdy materiał pokrywający go jest uszkodzony.
- Nie używaj fotela masującego, gdy jego przewody są uszkodzone.
- Nie używaj fotela masującego, gdy jesteś pod wpływem alkoholu oraz kiedy źle się czujesz.
- Nie zaleca się korzystania z fotela masującego wcześniej niż na godzinę po spożyciu posiłku.
- Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części fotela masującego.
- Nie ustawiaj dużej siły masażu w pierwszych etapach korzystania z fotela masującego.
- Nie używaj fotela masującego, gdy działa nieprawidłowo, koniecznie skonsultuj się ze sprzedawcą,
- Przerwij korzystanie z fotela masującego, kiedy poczujesz się źle, skonsultuj się z lekarzem.

## 2. Środowisko

- Nie używaj fotela masującego na zewnątrz budynków.
- Nie używaj fotela masującego w pomieszczeniach o dużej temperaturze i wilgoci powietrza.
- Nie ustawiaj fotela masującego w pobliżu ognia i chroń go przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach gdzie nie ma wystarczającej przestrzeni, bądź cyrkulacji powietrza.
- Nie używaj fotela masującego od razu po gwałtownych zmianach temperatury.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach silnie zakurzonych.

## 3. Przeciwwskazania

- Cięża.
- Do pół roku po operacji.
- Brak zgody lekarza.

## 4. Konserwacja i serwisowanie

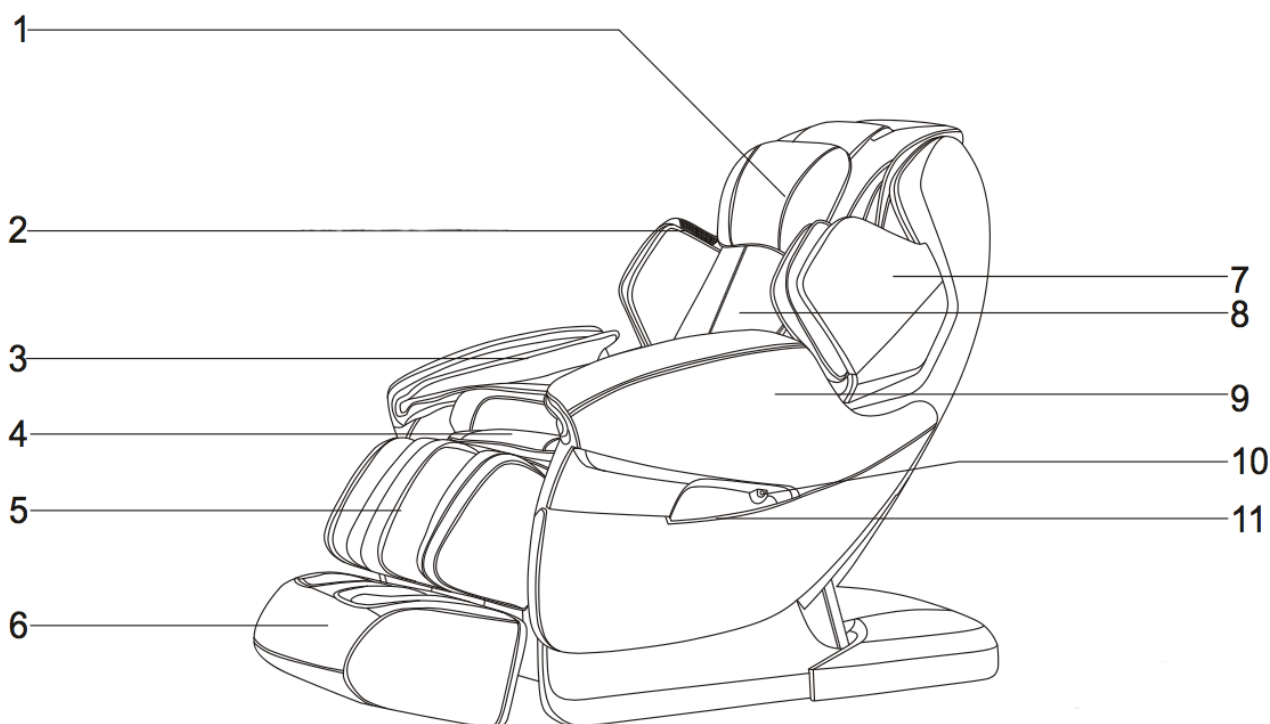
- Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem, w celu uniknięcia zranienia, bądź też uszkodzenia fotela masującego.
- Czyść fotel masujący za pomocą suchej szmatki lub specjalnych środków do tego przeznaczonych, nie używaj rozcieńczalnika, benzyny ani alkoholu.
- Jeżeli fotel masujący miałby być przez długi czas nieużywany, zwiń kabel, osłoń go i umieść w suchym pomieszczeniu.
- Nie przesuwaj fotela masującego po nierównej powierzchni.
- Pamiętaj o wyłączeniu fotela masującego po zakończeniu korzystania.
- Fotel masujący powinien być serwisowany wyłącznie przez serwis sprzedawcy.

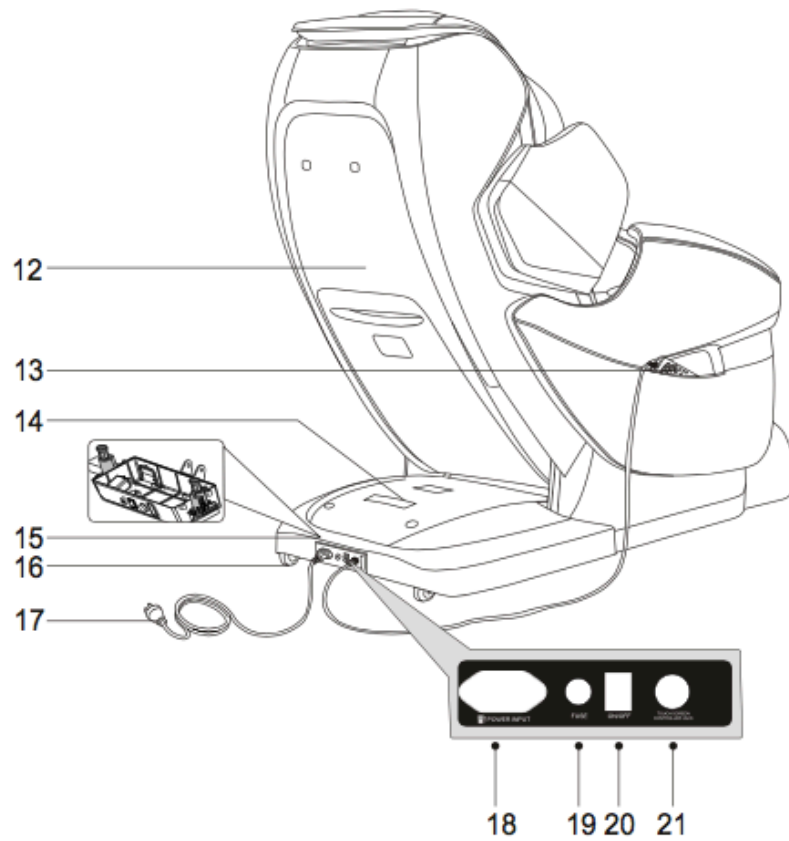
## 5. Rozwiązania zwykłych usterek

- Naturalnym jest odgłos pracujących siłowników w momencie używania fotela masującego.
- Jeżeli panel sterujący nie działa poprawnie, sprawdź czy fotel masujący jest podłączony poprawnie oraz czy włącznik jest w pozycji „ON”.
- Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać, co najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z fotela masującego.

Fotel masujący nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub przy braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z fotela masującego przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

## SCHEMAT FOTELE






- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Poduszka pod głowę        | 11. Kieszeń na pilot              |
| 2. Jonizator powietrza       | 12. Osłona tyłu                   |
| 3. Masażer przedramion       | 13. Pilot                         |
| 4. Poduszka na siedzisko     | 14. Osłona na mechanizm           |
| 5. Masażer nóg               | 15. Włącznik zasilania            |
| 6. Masażer stóp              | 16. Kółka                         |
| 7. Masażer ramion            | 17. Przewód zasilający            |
| 8. Oparcie                   | 18. Gniazdo na przewód zasilający |
| 9. Podłokietnik              | 19. Bezpiecznik                   |
| 10. Wejście słuchawkowe jack | 20. Włącznik zasilania            |
|                              | 21. Gniazdo na pilot              |

## FUNKCJE I DZIAŁANIE

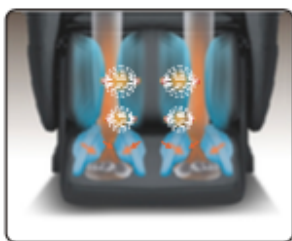- Fotel jest wyposażony w mechaniczne ramiona masujące w technologii Smart 3D, które poruszają się w trzech płaszczyznach.
- Funkcja automatycznego skanowania linii kręgosłupa przed rozpoczęciem masażu.
- 7 programów automatycznych: Demo, Arche Releve, Fatigue Recovery, Comfort, Full Air, Waist Stretch, Relief Stress.
- Możliwość wyboru zakresu masażu górnych części ciała: masaż punktowy, częściowy oraz masaż całego ciała. W masażu punktowym i częściowym możliwość dokładnego wybrania miejsca prowadzenia masażu.
- Możliwość zapisania, w jednej z 2 pamięci fotela masującego, wcześniej przeprowadzonego masażu.
- 11 technik masażu: ugniatanie ramion, oklepywanie, 2 warianty ugniatania, masaż synchroniczny (oklepywanie z ugniataniem), 2 warianty shiatsu, oraz 4 warianty 3D.
- Możliwość regulacji intensywności masażu mechanicznego – 5 poziomów.
- Możliwość regulacji szybkości prowadzenia masażu - 5 poziomów.
- Możliwość regulacji szerokości prowadzenia masażu, w trakcie technik takich jak shiatsu oraz oklepywanie - 5 poziomów.
- Możliwość regulacji intensywności masażu poduszkami powietrznymi - 3 poziomy.
- Podnóżek wyposażony w rolery masujące stopy.
- Ogrzewane oparcie – ogrzewanie promieniami podczerwonymi.
- L-shape - możliwość prowadzenia masażu mechanicznego w zakresie od kości ogonowej po szyję.
- Zero Gravity - możliwość komfortowego ułożenia w fotelu masującym.
- Zero Wall - technologia umożliwiająca zaoszczędzenie zajmowanego miejsca podczas masażu, poprzez ustawienie fotela masujące tuż przy ścianie, bez konieczności zabezpieczania miejsca na rozkładane oparcie.
- Możliwość wysunięcia podnóżka i dostosowania pozycji w fotelu masującym do wzrostu.
- Automatyczne ustawianie pozycji oparcia oraz podnóżka.
- Możliwość sterowania mobilną aplikacją za pomocą urządzenia typu smartfon lub tablet.
- Jonizator powietrza.
- Przy pomocy Bluetooth można podłączyć swoje urządzenie do fotela masującego i odtwarzać muzykę na słuchawkach.
- Możliwość dodawania nowych programów automatycznych.
- Ramiona masujące wrócą do pozycji wyjściowej po zakończeniu masażu.
- Magnetoterapia w podnóżkach.












Podłącz wtyczkę do zasilania

Włącz przycisk odpowiadający za zasilanie

## 1. START MASAŻU

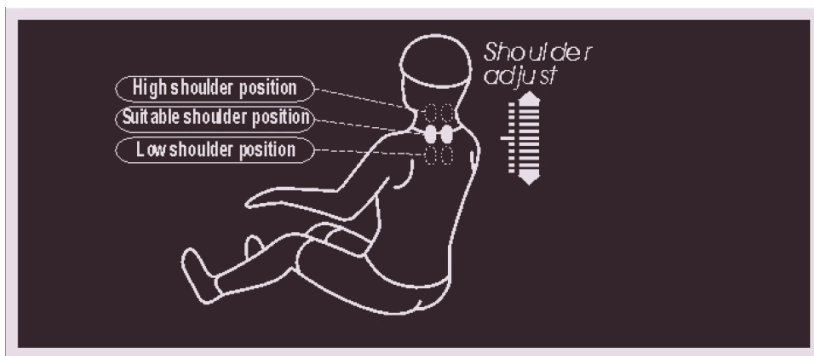- Wciśnij czerwony przycisk żeby zacząć masaż.
- Wybierz jedną z opcji masażu dostępnych w fotelu.

Przycisk	Opis	Informacja na wyświetlaczu
	Ustawienie w górę maksymalnego zasięgu ramion masujących	
	Ustawienie w dół maksymalnego zasięgu ramion masujących	



## 2. WYBÓR PROGRAMU AUTOMATYCZNEGO

Jeżeli wcześniej zapisałeś indywidualne programy automatyczne możesz je otworzyć.












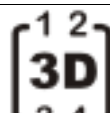


## Programy automatyczne






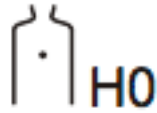
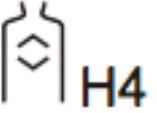
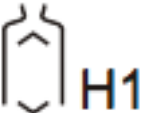
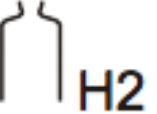
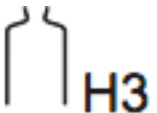
Przycisk	Funkcja	Informacja na wyświetlaczu
DEMO	Krótki masaż poprawiający samopoczucie	F0 Auto
COMFORT	Masaż komfortowy	F1 Auto
FATIGUE RECOVERY	Masaż odświeżający	F2 Auto
ACHE RELIEVE	Głęboki masaż rozluźniający obolałe mięśnie	F3 Auto
FULL AIR	Kompleksowy masaż całego ciała poduszkami powietrznymi	F4 Auto
WAIST STRETCH	Masaż rozciągający	F5 Auto
RELEF STRESS	Masaż relaksujący, pobudzający cyrkulację krwi	F6 Auto

## 2. WYBÓR TECHNIK MANUALNYCH



### Techniki manualne

Przycisk	Możliwość regulacji	Wyświetlacz
 Ugniatanie ramion	Szybkość i intensywność	
 Ugniatanie	Szybkość, intensywność	
 Oklepywanie	Szybkość, szerokość i intensywność	
 Ugniatanie z oklepywaniem	Szybkość, intensywność	
 Shiatsu	Szybkość, szerokość i intensywność	
 3D	Szybkość, szerokość	











 Szybkość	Ustawienia w 5 poziomach	 Speed
 Szerokość	Ustawiana w 5 poziomach	 Width
	Stała pozycja masażu (fixed), punktowy	 H0
	Mały obszar masażu (partial), częściowy	 H4
	Całościowy masaż pleców (overall)	 H1
	Masaż górnych partii ciała (ramiona, szyja)	 H2
	Masaż dolnych partii ciała (plecy, talia)	 H3





#### Ustawienia ramion masujących

	Ustawienie pozycji mechanizmu masującego (dostępne w punktowym i częściowym masażu).	Ramiona masujące przesuwają się w górę.
		Ramiona masujące przesuwają się w dół.

### 3. USTAWIENIA MASAŻU PODUSZKAMI POWIETRZNYMI




#### Ustawienia poduszek masujących

Przycisk	Funkcja	Wyświetlacz
	Włączenie/wyłączenie masażu poduszkami powietrznymi dolnych partii ciała	Feet  Back  Buttocks 
	Intensywność masażu poduszkami powietrznymi	Feet  Back  Buttocks 




	Włączenie/wyłączenie rozciągania	
	Regulacja intensywności masażu ramion	Arm 



#### 4. INNE FUNKCJE FOTEŁA MASUJĄCEGO

Inne funkcje






Funkcja	Możliwości regulacji	Wyświetlanie
 Zwiększenie intensywności masażu	5 poziomów	 Upper
 Zmniejszenie intensywności masażu		
 Masaż rolujący na stopy	3 poziomy szybkości	
 <b>HEATER</b> Ogrzewanie	Ogrzewanie oparcia promieniami podczerwonymi. Odczuwalne po trzech minutach.	

Funkcje jonizatora

NEGATIVE OXYGEN IONS	Włączenie jonizatora powietrza	 App Auto
	Zmniejszenie ilości jonizowanego powietrza	 App Auto
	Wyłączenie jonizatora powietrza	 App Auto

Przycisk	Opis	Wyświetlacz
 Regulacja czasu	Domyślny czas masażu to 20 minut. Przyciskając ten przycisk zwiększamy czas o 5 minut. Możliwość regulacji od 5 do 40 minut.	

## 5. USTAWIENIA POZYCJI FOTEŁA

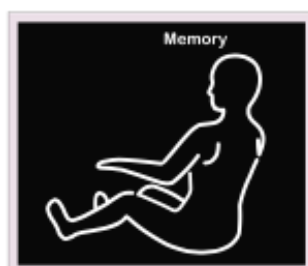
Pozycja fotela	
Przycisk	Funkcja
	Włączając ten przycisk fotel przechodzi do pozycji Zero Gravity.
	Przytrzymaj przycisk, a podnózek będzie się powoli podnosił, gdy puścisz zatrzyma się w aktualnej pozycji.
	Przytrzymaj przycisk, a podnózek będzie się powoli obniżał, gdy puścisz zatrzyma się w aktualnej pozycji.
	Przytrzymaj przycisk a oparcie będzie się powoli podnosiło, gdy puścisz zatrzyma się w aktualnej pozycji.
	Przytrzymaj przycisk a oparcie będzie się powoli opuszczało, gdy puścisz zatrzyma się w aktualnej pozycji.

## 6. ZAKOŃCZENIE MASAŻU

- Aby zakończyć masaż przed upływem czasu, na jaki został przewidziany, wciśnij czerwony przycisk. Masaż zostanie zatrzymany, podnózek i oparcie powróci do pozycji siedzącej.
- Po upływie przewidzianego czasu masaż zostanie zatrzymany, a fotel masujący pozostanie w wybranej pozycji.

## 7. ZAPISYWANIE MASAŻU


- Po zakończeniu wybranego programu lub podczas wyłączania urządzenia, na pilocie wyświetli się informacja "Memory", przypominająca o możliwości zachowania w pamięci przeprowadzonego masażu.
- Wciśnij przycisk M1 lub M2, aby zachować przeprowadzony masaż w jednej z dwóch pamięci.



# OBSŁUGA FOTEŁA ZA POMOCĄ APLIKACJI

## 1. START APLIKACJI

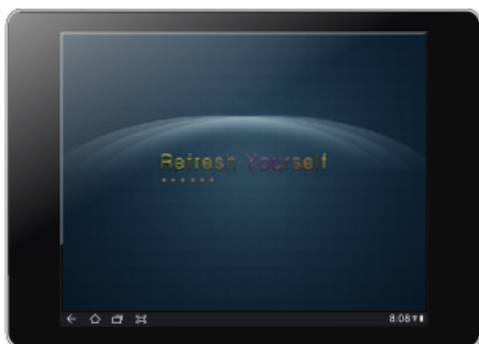- Włącz aplikację odpowiedzialną za obsługę fotela.
- Po włączeniu aplikacji odczekaj około 5 sekund, aż pojawi się menu.
- Wciśnij przycisk uruchamiający masaż.



Wygląd startowy



Widok ekranu w trybie „Standby”

## 2. USTAWIANIE WZROSTU



- Po włączeniu masażu fotel zacznie wykrywać pozycje ramion oraz kształt kręgosłupa. Poczekaj aż proces się zakończy, fotel wtedy wyda sygnał dźwiękowy.
- Pozycje ramion można ustawić manualnie w 11 stopniowej skali. Czas przeznaczony na regulację pozycji ramion to 10 sekund po czym fotel uruchomi program automatyczny.

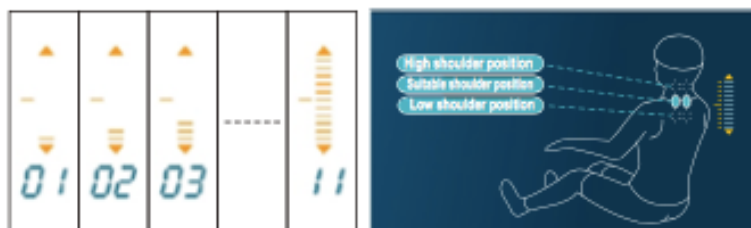


Widok podczas automatycznego wykrywania ramion



Widok podczas manualnego wykrywania ramion

Przyciski	Funkcja
	Podwyższenie maksymalnego zakresu masażu
	Obniżenie maksymalnego zakresu masażu



Zakres ustawień zakresu masażu.

### 3. START MASAŻU ORAZ PAUZA


- Po zakończeniu ustawienia pozycji ramion uruchomi się program automatyczny. Aby go wstrzymać wciśnij przycisk „Pause”. Funkcje masażu się zatrzymają. Aby kontynuować masaż wciśnij przycisk „Running”. Program automatyczny będzie kontynuowany od momentu w którym został zatrzymany.
- Po przekroczeniu 10 minut paazy fotel zostanie wyłączony.



Widok podczas masażu



Widok w trakcie paazy

Przycisk	Funkcje
 <b>PAUSE</b>	Przycisk do wstrzymywania masażu
 <b>RUNNING</b>	Przycisk do kontynuowania masażu



### 4. USTAWIANIE INTESYWNOSCI MASAŻU

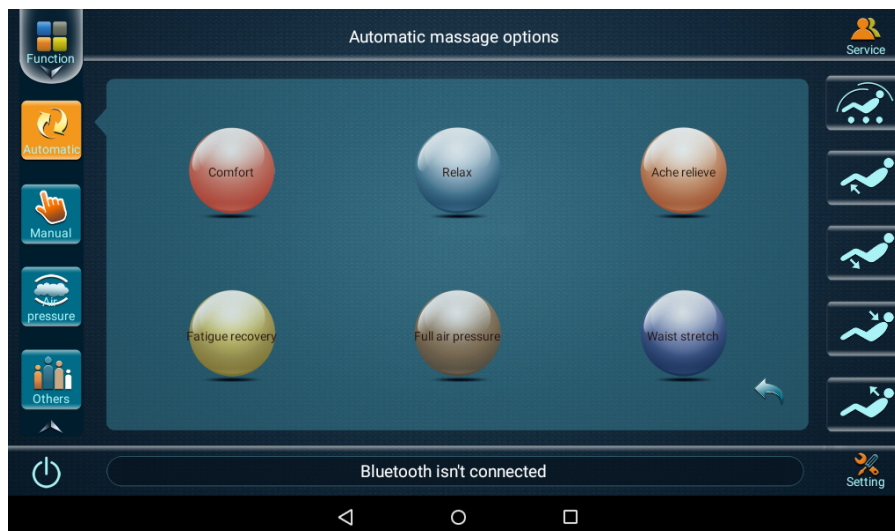
W trakcie masażu istnieje możliwość regulacji intensywności masażu w 5 stopniowej skali.



Ustawienie intensywności masażu za pomocy paska przedstawionego na rysunku

## 5. PROGRAMY AUTOMATYCZNE

- Kliknij w , aby rozwinąć menu funkcji fotela.
- Kliknij w , aby wybrać jeden z programów automatycznych.



Widok wyboru programów automatycznych


Przycisk	Funkcja
	Masaż komfortowy
	Masaż relaksacyjny
	Głęboki masaż rozluźniający obolałe mięśnie
	Kompleksowy masaż wszystkich części ciała
	Kompleksowy masaż całego ciała poduszkami powietrznymi
	Masaż rozciągający
	Powrót do widoku głównego

## 6. MASAŻE MANUALNE

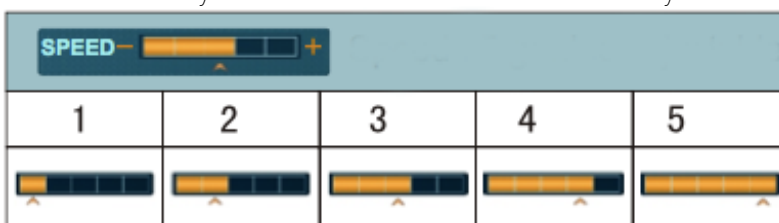
Kliknij w , aby wybrać jedną z technik manualnych oraz dopasować ją do swoich potrzeb.





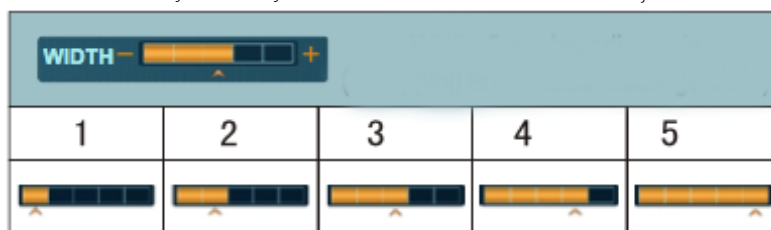
Widok wyboru i ustawień technik manualnych







Wybór szybkości techniki manualnej



Wybór szerokości techniki manualnej




Przycisk	Możliwości regulacji
 Ugniatanie ramion	Szybkość i intensywność
 Ugniatanie	Szybkość i intensywność
 Oklepywanie	Szybkość, szerokość i intensywność. 2 warianty masażu.

 Ugniatacie z oklepywaniem	Szybkość i intensywność.
 Shiatsu	Szybkość , szerokość oraz szerokość. 2 warianty masażu.
 3D	Szybkość i szerokość. 4 warianty masażu.
	Powrót do widoku głównego.



- Kliknij  , aby wybrać zakres pracy techniki manualnej.



Widok wyboru zakresu pracy techniki manualnej

Przycisk	Zakres
	Całościowy masaż pleców
	Masaż górnych partii ciała (ramiona, szyja)
	Masaż dolnych partii ciała (plecy, talia)



	Mały obszar masażu (partial), częściowy
	Stała pozycja masażu (fixed), punktowy

## 7. PODUSZKI POWIETRZNE

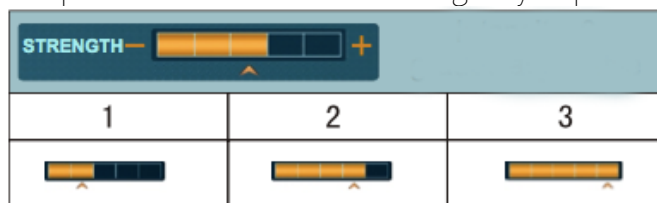


Kliknij , aby wybrać masaż poduszkami powietrznymi oraz ustawienia ich dotyczące.

- Ustawienie masażu górnych partii ciała.



Widok podczas ustawiania masażu górnych partii ciała



Ustawienie intensywności masażu ramion

Przycisk	Funkcja
	Włączenie/wyłączenie masażu na ramiona

- Ustawienie masażu dolnych partii ciała




Widok podczas ustawiania masażu dolny partii ciała

Przycisk	Funkcja
	Włączanie/wyłączenie masażu poduszkami powietrznymi talii, pośladków oraz nóg
	Włączanie/wyłączenie masażu poduszkami powietrznymi talii oraz pośladków
	Włączanie/wyłączenie masażu poduszkami powietrznymi nóg
	Włączanie/wyłączenie rozciągania nóg


## 8. INNE FUNKCJE MASAŻU

- Kliknij , aby wybrać inne funkcje masażu.


- Kliknij , żeby włączyć ogrzewanie.



Widok ustawienia ustawień ogrzewania

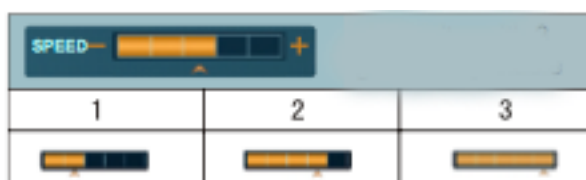
Przycisk	Funkcja
	Włączanie/wyłączenie ogrzewania w fotelu. Fotel potrzebuje około 3 minut na pełne ogrzanie.

- Kliknij , aby włączyć rolery na stopy.


Przycisk	Funkcja
	Włączanie/wyłączenie rolerów na stopy.



Widok ustawień rolerów na stopy.








Wybór szybkości pracy rolerów na stopy.

- Kliknij , aby wybrać jeden z wgranych programów automatycznych.



Widok wyboru wgranych programów automatycznych.

## 9. USTAWIENIA POZYCJI FOTEŁA ZA POMOCĄ APLIKACJI



Przycisk	Funkcja
	Przytrzymaj aby, delikatnie podnosić podnóżek. Puść aby, zatrzymać w aktualnej pozycji
	Przytrzymaj aby, delikatnie obniżyć podnóżek. Puść aby, zatrzymać w aktualnej pozycji
	Przytrzymaj aby, delikatnie podnosić oparcie. Puść aby, zatrzymać w aktualnej pozycji
	Przytrzymaj aby, delikatnie obniżyć oparcie. Puść aby, zatrzymać w aktualnej pozycji
	Funkcja Zero Gravity w 3 różnych pozycjach

## 10. USTAWIENIE APLIKACJI

- Kliknij  ,a następnie  ,aby zmienić język, w którym pracuje aplikacja.




Widok ustawień języka

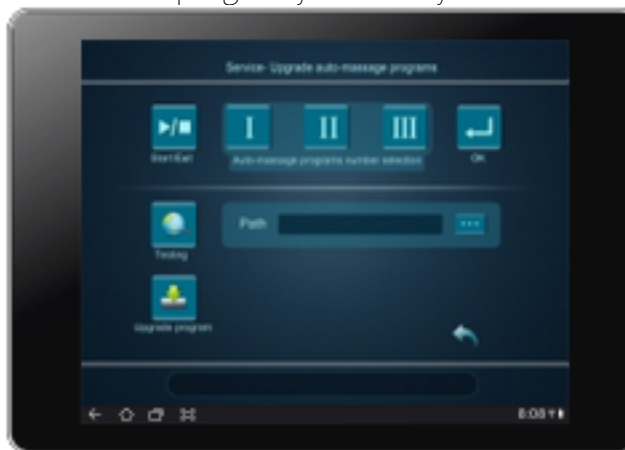
- Kliknij  ,a następnie  ,aby zmienić głośność muzyki.








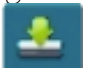
Widok ustawień głośności.

## 11. DODAWANIE NOWYCH PROGRAMÓW AUTOMATYCZNYCH

- Kliknij , aby dodać nowe programy automatyczne.



Widok dodawania programów automatycznych.

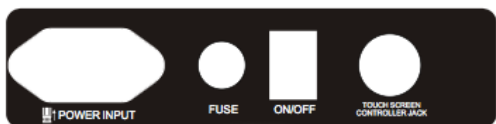
- Kliknij , aby zacząć proces dodawania nowego programu automatycznego.
- Kliknij  żeby wybrać jedno z trzech miejsc dostępnych na nowe programy automatyczne i zatwierdź .
- Sprawdź dostępność połączenia klikając . Jeżeli test przejdzie prawidłowo pojawi się komunikat „test successful”. W przeciwnym wypadku sprawdź połączenie między fotelem a urządzeniem.
- By znaleźć plik z nowym programem automatycznych wybierz .
- By zakończyć proces kliknij  i poczekaj na informacje „download successful”.

## 12. UDOSTĘPNIANIE MUZYKI

Podczas połączenia urządzenia z fotelem istnieje możliwość udostępnienia muzyki. Wystarczy włączyć muzykę na odtwarzaczu w swoim urządzeniu i podłączyć słuchawki do gniazda w fotele.

## ZAKOŃCZENIE MASAŻU

- Aby zakończyć masaż wciśnij przycisk odpowiadający za wyłączanie fotela.
- Wyłącz fotel z zasilania.



Przełącz włącznik zasilania




Odłącz zasilanie


## MONTAŻ I USTAWIENIE FOTEŁA
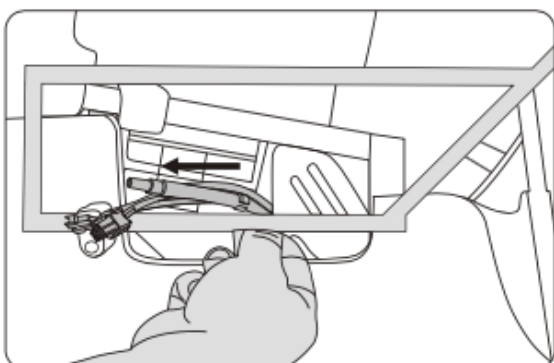
### MONTAŻ PODŁOKIETNIKÓW

- Złóż fotel do pozycji siedzącej.
- Wyciągnij podłokietniki z kartonu.
- Wyciągnij przewody przez kwadratowy otwór (Rysunek 1).
- Podłącz przewody (Rysunek 2).




Rysunek 1

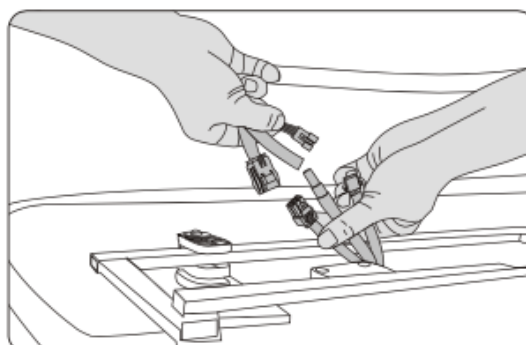


Rysunek 2

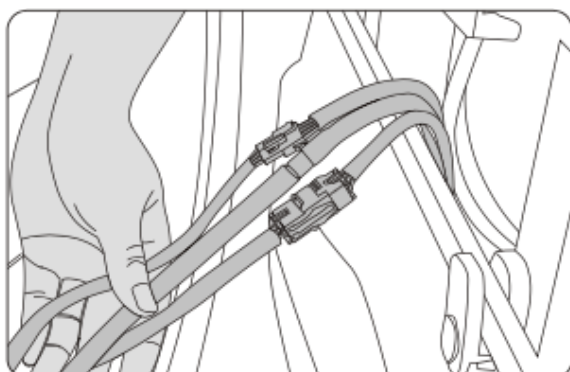- Prawidłowo połączone przewody wyglądają jak na rysunku 3.
- Schowaj połączone przewody przez kwadratowy otwór i ułóż je na jego dnie. Uważaj żeby nie przygnieść przewodów (Rysunek 4).



Rysunek 3

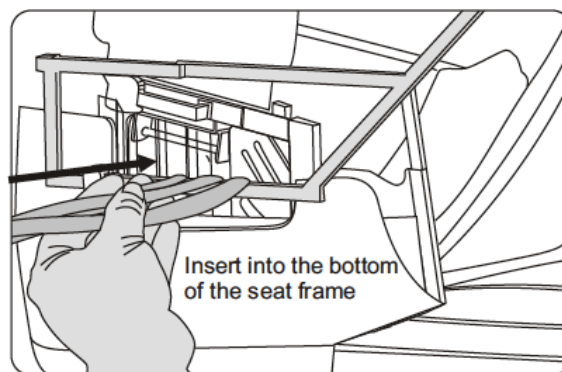


Rysunek 4


- Wsuń delikatnie podłokietnik tak żeby zahaczył o metalowe elementy przy fotelu (Rysunek 5).
- Jeżeli podłokietnik będzie odpowiednio wsadzony dwa otwory na śruby będą na siebie nachodzić.
- Wkręć pierwszą śrubę (Rysunek 6).
- Wkręć drugą śrubę (Rysunek 7).



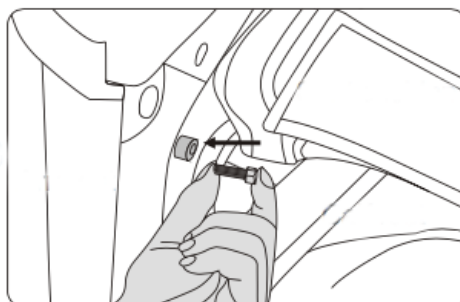Rysunek 5



Rysunek 6

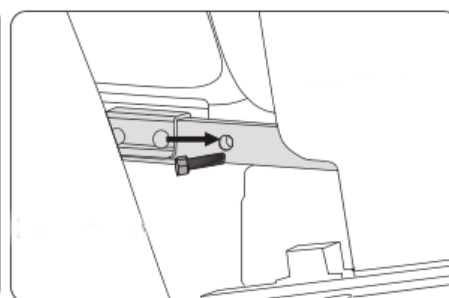


Rysunek 7


- Z drugim podłokietnikiem powtórz proces.

## PRZYPINANIE PODUSZKI

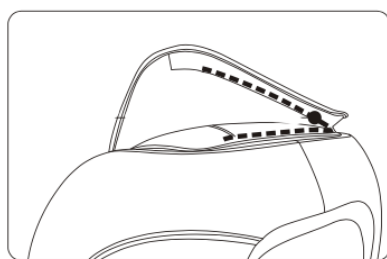
- Poduszkę przypnij zamkiem u góry (Rysunek 1).
- Przelóż poduszkę przez pasek u góry fotela (Rysunek 2)
- Połóż poduszkę na oparciu fotela (Rysunek 3)



Rysunek 3

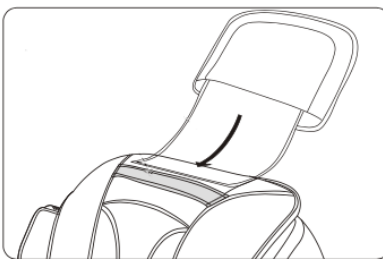


Rysunek 2

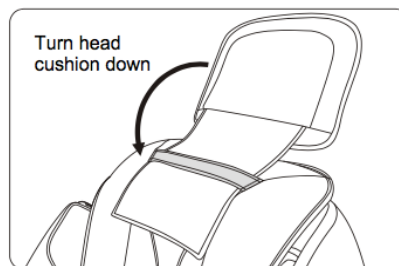

Rysunek 3

## PODŁOŻE

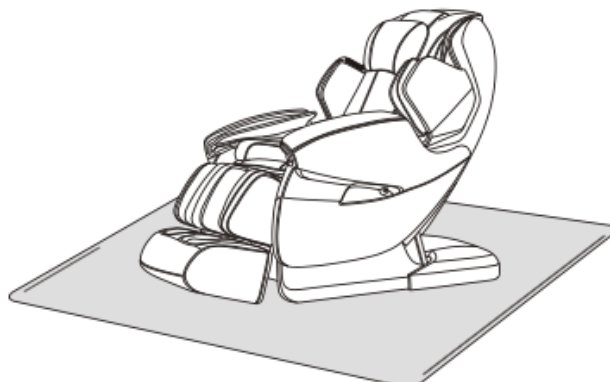Umieszczenie i używanie fotela masującego na drewnianej podłodze może ją zniszczyć. Zaleca się stosowanie dywaników bądź innych podstaw, żeby zapobiec uszkodzeniom podłogi.



## PRZENOSZENIE FOTELA

Przenoszenie możliwe jest za pomocą kółek (używaj tak jak na rysunku poniżej).



## SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model: Massaggio Stravagante

Napięcie: 220 / 240 V~ 50 Hz / 60 Hz

Pobór mocy: 200 W

Pobór mocy w stanie gotowości: 0,33 W

Sugerowany czas pracy: 20 min.